



EN

**SAFE AGE**




**LED FOLDING CANE**

USER MANUAL


## A QUICK START

1. Unbutton the wrist strap that is holding the cane together.
2. Hold the handle and release the folded sections. The cane will automatically snap into place.
3. Untwist the LED light cap and remove the battery protection tab to use the LED Light (see changing the batteries section for help).

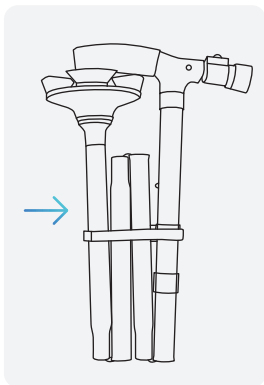

## B CANE HEIGHT ADJUSTMENT

1. Loosen the locking latch.
2. Adjust brass pin to desired position.
3. Tighten the locking latch.

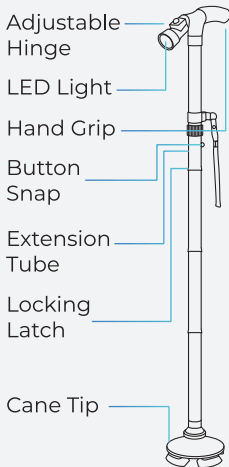

## C FIND YOUR CORRECT CANE HEIGHT


Let your arm hang naturally by your waist. Adjust the cane height so the handle touches your wrist.

## D OPERATE THE LED LIGHT

Remove the paper before use the LED Light

## E CHANGING BATTERIES

1. Twist cap counterclockwise and remove the old batteries.
2. Insert 4 new LR44 Batteries negative side first into the black casing. Place black casing back into the battery holding slot negative side first.
3. Twist cap clockwise to lock into place.

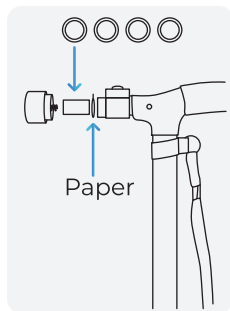

**Note:** Twist the cap all the way on to ensure the batteries are engaged.



## WARNING

- Make sure the brass pin is locked into place before use.
- Weight Capacity: 114 KG



**SAFE AGE**



NL


**SAFE AGE**



**LED WANDELSTOK**  
HANDLEIDING


## A SNELLE START

1. Maak de polsband los die de wandelstok bij elkaar houdt.
2. Houd het handvat vast en laat de gevouwen delen los. De stok klikt automatisch op zijn plaats.
3. Draai de kap van de LED-lamp los en verwijder het batterij-beschermingslipje om de LED-lamp te gebruiken (zie het gedeelte over het vervangen van de batterijen voor hulp).

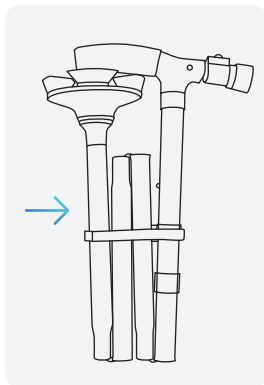

## B HOOGTE AANPASSING

1. Draai de vergrendeling los.
2. Stel de koperen pen in de gewenste positie.
3. Draai de vergrendeling vast.

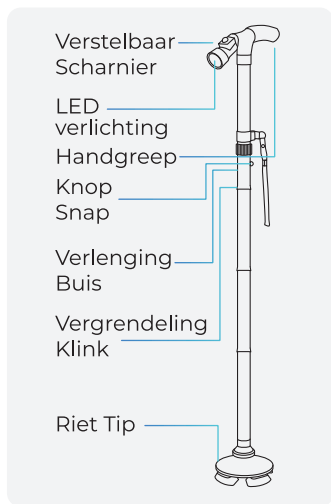

## C VIND UW JUISTE STOKHOOGTE


Laat je arm op een natuurlijke manier langs je middel hangen. Pas de hoogte van de stok aan zodat het handvat uw pols raakt.

## D BEDIEN DE LED-LAMP

Verwijder het papier voordat u de LED-lamp gebruikt

## E BATTERIJEN VERWISSELEN

1. Draai de dop linksom en verwijder de oude batterijen.
2. Plaats 4 nieuwe LR44-batterijen met de negatieve kant eerst in de zwarte behuizing. Plaats eerst de zwarte behuizing terug in de batterijhouder met de negatieve kant.
3. Draai de dop met de klok mee om op zijn plaats te vergrendelen.

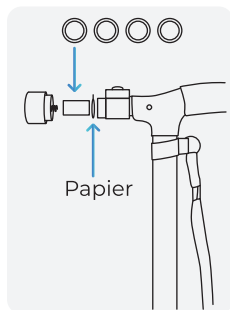

**Opmerking:** draai de dop er helemaal op om ervoor te zorgen dat de batterijen goed vastzitten.



## WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de koperen pin goed op zijn plaats zit voor gebruik.
- Gewichtscapaciteit: 114 KG



**SAFE AGE**



DE




**SAFE AGE**



**LED-KLAPPSTOCK**  
**BENUTZERHANDBUCH**


## A SCHNELLSTART

1. Knöpfen Sie die Handschleufe auf, die den Gehstock zusammenhält.
2. Halten Sie den Griff fest und lassen Sie die gefalteten Abschnitte los. Der Stock rastet automatisch ein.
3. Drehen Sie die LED-Lichtkappe auf und entfernen Sie die Batterieschutzlasche, um das LED-Licht zu verwenden (siehe Abschnitt „Batterien wechseln“ für Hilfe).

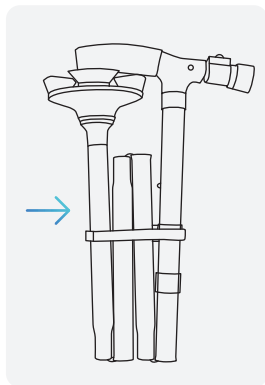

## B STOCKHÖHE EINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Verriegelungslasche.
2. Stellen Sie den Messingstift auf die gewünschte Position ein.
3. Ziehen Sie den Verschlussriegel fest.

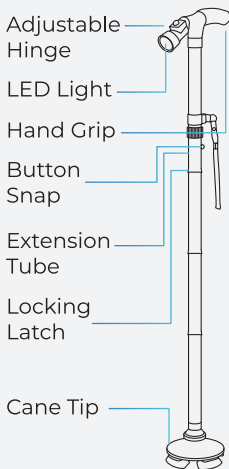

## C FINDEN SIE IHRE RICHTIGE STOCKHÖHE


Lassen Sie Ihren Arm ganz natürlich an Ihrer Taille hängen. Stellen Sie die Stockhöhe so ein, dass der Griff Ihr Handgelenk berührt.

## D LAUFEN SIE DAS LED-LICHT

Entfernen Sie das Papier, bevor Sie das LED-Licht verwenden

## E AKKUS WECHSELN

1. Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die alten Batterien.
2. Legen Sie 4 neue LR44-Batterien mit dem Minuspol zuerst in das schwarze Gehäuse ein. Setzen Sie das schwarze Gehäuse mit der negativen Seite zuerst wieder in den Batteriehalteschlitz ein.
3. Drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

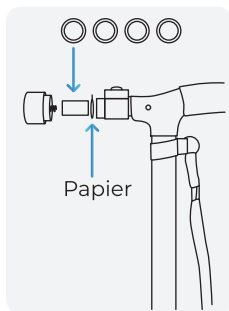

**Hinweis:** Drehen Sie die Kappe ganz auf, um sicherzustellen, dass die Batterien eingerastet sind.



### WARNUNG

- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Messingstift eingerastet ist.
- Gewichtskapazität: 114 KG



**SAFE AGE**